

FARMACIA



LABORATORIO




CROMATOGRAFÍA

SUPERA LOS REQUISITOS DE LABORATORIO DE ENERGY STAR® EN UN 69%*

*En referencia al modelo TSCI-600PR-SWG




Estabilidad de la Temperatura

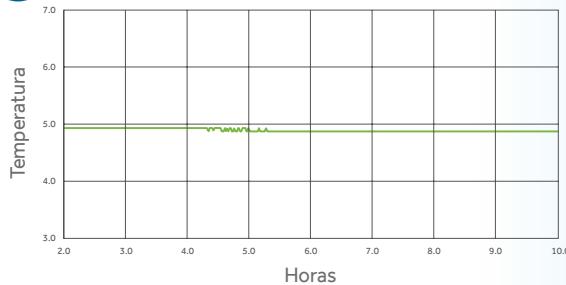

Diseñado para funcionar dentro de un rango definido de temperatura.



Uniformidad de la Temperatura

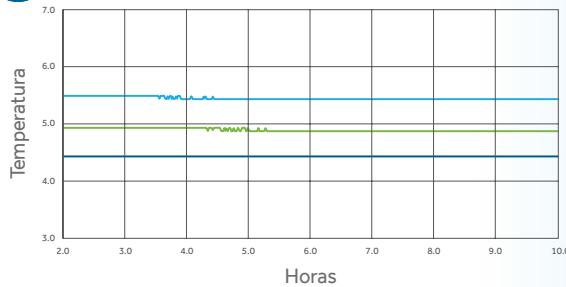

Garantiza temperatura uniforme en todo el gabinete.

Utiliza refrigerante de hidrocarburo R290, un refrigerante ecológico redefinido que no daña la capa de ozono.

Tecnología de autolimpieza que invierte la dirección del ventilador de la unidad condensadora durante 20 segundos en cada arranque del compresor para eliminar polvo e impurezas.

Puerto para sonda de temperatura que permite insertar un dispositivo de medición de temperatura independiente.

Puertos de acceso y salidas dúplex únicamente en gabinetes de laboratorio y cromatografía.

Las alarmas de control incluyen temperatura alta/baja, puerta entreabierta, falla de energía, falla del sensor.

Versión de puerta sólida y puerta de cristal disponibles en todos los tamaños.